



## epilSystem 13.56


Un completo sistema de depilación eléctrica definitiva. El equipo dispone de cinco sistemas de depilación eléctrica con los que podremos seleccionar el adecuado, en función del tipo de pelo y sensibilidad de la persona a depilar:

- Termolisis
- Flash
- Electrolisis
- Blend HF
- Blend GV

**epilSystem 13.56** incorpora un sistema de sonda de temperatura, a través del cual realizaremos tratamientos de depilación termoquímica, consiguiendo la progresiva degeneración de las células germinativas del bulbo piloso.

El resultado de los tratamientos está garantizado, sin producir sensación de dolor.



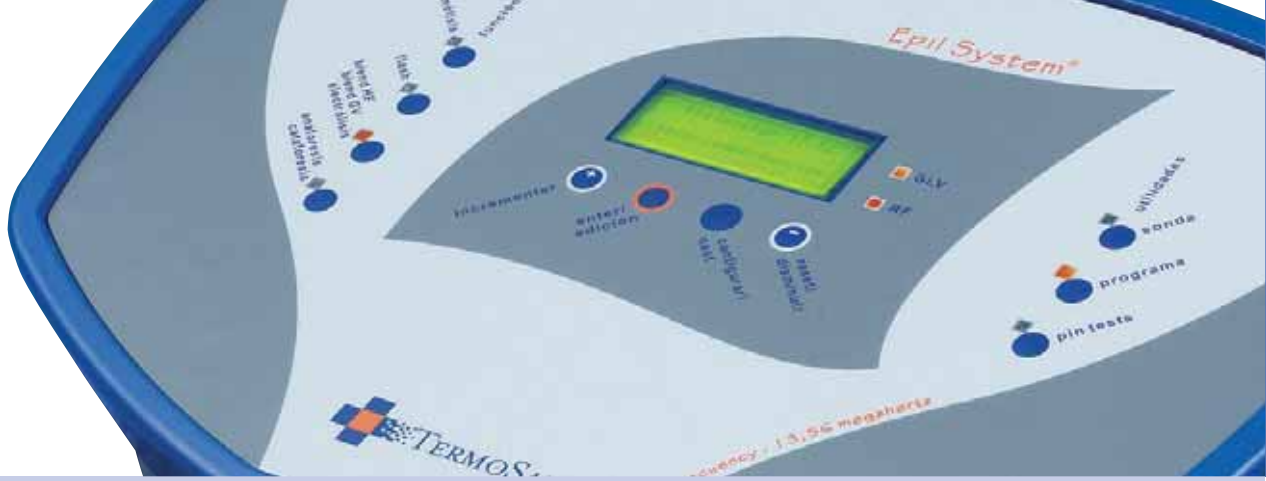

# epilSystem Un completo sistema de depilación eléctrica definitiva

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Otras funciones a destacar en el equipo **epilSystem 13.56** son la Anaforesis y la Cataforesis, ambas muy útiles en tratamientos de depilación eléctrica.

La Anaforesis por su efecto vaso-dilatador, muy eficaz antes de la depilación y la Cataforesis por su efecto calmante, antiinflamatorio y nivelador del Ph, muy provechoso y de satisfactorios resultados después de la depilación.


Además, el equipo incorpora la función Pin Test, con la que podremos comprobar, previamente al inicio del tratamiento de depilación eléctrica, el estado de conductividad del cabezal porta-agujas.

- Equipo:**  
Equipo de depilación eléctrica
- Tensión de red:**  
230V ~ 50/60 Hz  
Opcional 115V ~ 50/60 Hz
- Características de salida:**
  - Termolisis:**
    - Tensión máxima: 280 Vpp. con carga de 600 ohms
    - Frecuencia: 13,56 Mhz.
    - Tiempo de pulso: 0,01 a 0,25 seg.
    - Nº pulsos: 1 a 10
    - Tiempo entre pulsos: 0,55 seg.
  - Flash:**
    - Tensión máxima: 280 Vpp. con carga de 600 ohms.
    - Frecuencia: 13,56 Mhz.
    - Tiempo de pulso: 0,001 a 0,099 seg.
    - Nº pulsos: 1 a 10
    - Tiempo entre pulsos: 0,55 seg.
  - Electrolisis:**
    - Intensidad máxima: 0,1 a 9,9 mA
    - Tiempo de pulso: 1 a 255
  - Sonda:**
    - Temperatura regulable: 35 a 50 °C

**Consumo:**  
50 VA

**Peso:**  
Con pie: 20 Kg  
Sin pie: 5,85 Kg

**Dimensiones:**

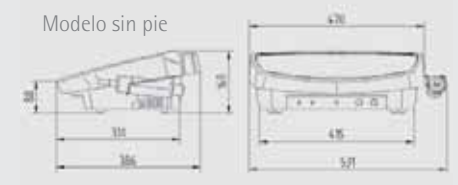

Depilación en ingie



Depilación facial



Depilación por sonda



Pulverización de loción retardadora de vello



- X1
- X1
- X1
- X2
- X1
- X1
- X1